


# Darstellung der Kabelverlegung

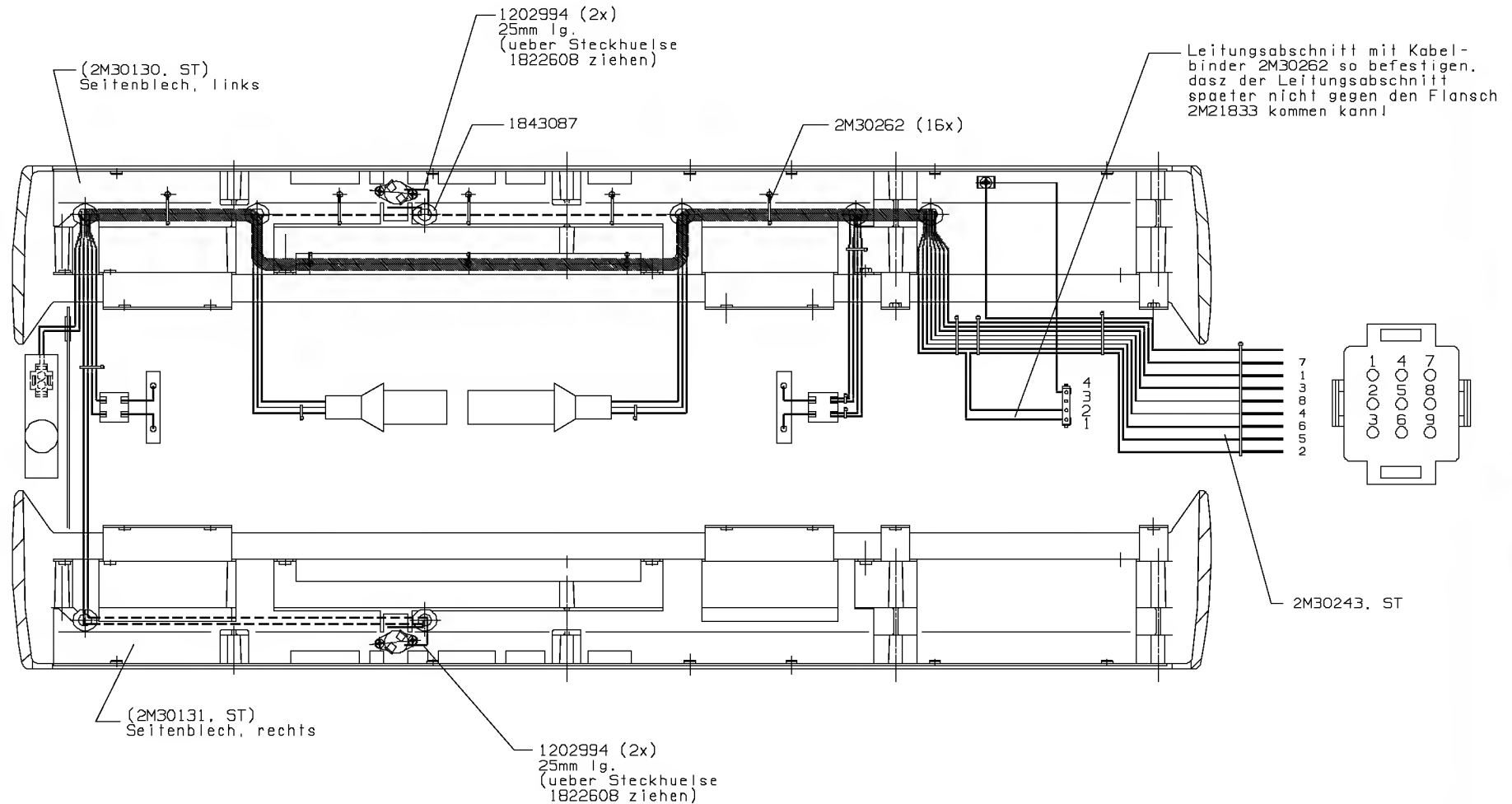

\* zuerst 8 Kabelbinder an das Seitenblech 2M30130 anbringen und festziehen. An diesen Kabelbindern den Kabelbaum 2M30243 mit 8 weiteren Kabelbindern befestigen. Dabei beachten, dass die Leitungen beim Anbinden nicht direkt aufs Metall gepresst werden.

1	Nachtlicht	br
2	Phototherapie	bl
3	Phototherapie	br
4	Arbeitslicht	br
5	Heizung	bl
6	Heizung	br
7	Zentral Alarm	br
8	Rueckleiter	bl
9	Schutzleiter	

type	language	title
drawing	de	Naerestrainer L10V
replacement for	number	
2M30153-06	2M30153	
creating system	release status	revision index
CADRA	RELEASED	08
	occurs	--
	page/total	02/02
	Dräger	Dräger Medizintechnik
	0-2542 Litbeck	
	size A2	